

# BD Vacutainer® Safety-Lok™

## Sicherheitspunktionsbesteck

für Blutentnahme und Kurzzeitinfusionen



**BD**

Helping all people  
live healthy lives



# BD Vacutainer® Safety-Lok™

## Sicherheitspunktionsbesteck

... für Blutentnahme sowie Kurzzeitinfusion bis zu zwei Stunden

Dieses neue Produkt bietet Ihnen folgende Vorteile:

- **Höchster Anwenderkomfort**  
Die hohe Elastizität der Flügel bietet optimale Griffbarkeit und Halt bei der Punktion.
- **Weniger Schmerzempfinden beim Patienten**  
Die Kanüle ist aufgrund eines optimalen Kanülenschliffs, spezieller Poliertechnologie und patentierter Beschichtung besonders gleitfähig. Dies ermöglicht ein leichtes Eindringen in die Haut.
- **Keine gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffe**  
Das Schlauchmaterial enthält kein DEHP und ist selbstverständlich latexfrei.
- **Schutz vor Nadelstichverletzungen**  
Das neue Sicherheitspunktionsbesteck hat einen integrierten Kanülenschutz, der einhändig aktiviert werden kann. Das Produkt erfüllt alle Anforderungen an ein Sicherheitsprodukt entsprechend den Richtlinien der TRBA 250.
- **Leichtere Handhabung**  
Die plastischen Eigenschaften des Schlauches wurden so verändert, dass er sich nicht mehr sprungfederartig einwickelt.

### Produktinformation


| Artikelnummer | Farbcode   | Kanüle            | Schlauchlänge |
|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 367246        | grün       | 21G, 0,8mm x 19mm | 30 cm         |
| 367247        | hellblau   | 23G, 0,6mm x 19mm | 30 cm         |
| 368383        | dunkelblau | 25G, 0,5mm x 19mm | 30 cm         |



BD Safety-Lok Sicherheitspunktionsbesteck ohne Luer-Adapter

### Empfohlene Handhabung:


Führen Sie die Punktion wie gewohnt durch. Decken Sie die Punktionsstelle mit einem sterilen Tupfer ab. Ziehen Sie das Besteck aus der Vene und komprimieren Sie die Punktionsstelle. Den Sicherheitsmechanismus aktivieren Sie wie folgt:

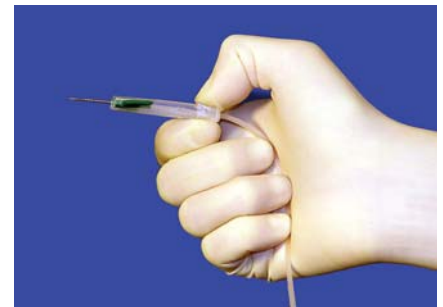

Halten Sie das Besteck zwischen Daumen und Zeigefinger an der Grifffläche des Sicherheitsmechanismus. Fixieren Sie gleichzeitig den Schlauch mit Mittel-, Ring- und kleinem Finger in der Handinnenfläche.



Halten Sie den Schlauch gespannt, und schieben Sie den Kanülenschutz über die Kanüle.

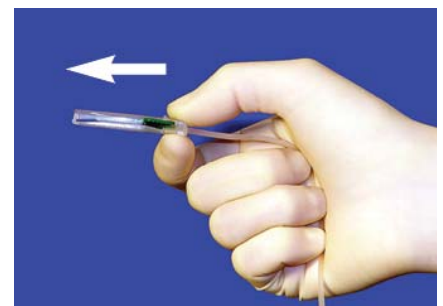

Nach dem vollständigen Vorschieben rastet die Kanülenschutzhülse fühl- und hörbar irreversibel über der Kanüle ein. Entsorgen Sie das Besteck in einem geeigneten Kanülenabwurfbehälter entsprechend den Vorschriften Ihres Hauses.



Deutschland: **BD** · Tullastr. 8-12 · 69126 Heidelberg · Tel. 06221 3050 · [www.bd.com/de](http://www.bd.com/de)  
Österreich: **BD** · Am Concorde Park E1/7 · 2320 Schwechat · Tel. 01 7063660 · [www.bd.com](http://www.bd.com)  
Schweiz: **Becton Dickinson AG** · Postfach · 4002 Basel · Tel. 061 4852222 · [www.bd.com/ch](http://www.bd.com/ch)